

Wiedereröffnung Ihrer Zahnarztpraxis – Tipps zu A-dec Behandlungseinheiten


Infolge der weltweiten COVID-19 Pandemie berücksichtigen Sie bitte diese wichtigen Hinweise zu A-dec Behandlungseinheiten, während Sie und Ihr Team sich auf die Wiedereröffnung Ihrer Praxis vorbereiten ...



Allgemeine Tipps für das Behandlungszimmer:


- Stellen Sie sicher, dass Ihre Praxisprotokolle und -richtlinien so aktualisiert wurden, dass sie den Vorgaben der lokalen Regierung und der Gesundheitsbehörde entsprechen.
- Beziehen Sie sich immer auf die Gebrauchsanweisung des Herstellers, die mit Ihrem Gerät mitgeliefert wurde. Die Empfehlungen in diesem Dokument gelten nur für A-dec Geräte.
- Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass Ihr Behandlungszimmer eine normale Raumtemperatur hat. Extreme Temperaturschwankungen können die Geräteleistung gegebenenfalls beeinträchtigen.
- Reinigen und desinfizieren Sie alles im Behandlungszimmer, so wie Sie es für gewöhnlich nach jedem Patienten oder während Ihres wöchentlichen Reinigungsprotokolls machen würden. Stellen Sie sicher, dass alle Berührungs- und Übertragungsflächen gereinigt und desinfiziert wurden, bevor Sie Ihre Praxis wiedereröffnen. *(Weitere Informationen finden Sie in den unten aufgeführten Ressourcenlinks.)*
- Überprüfen Sie die Herstellerempfehlungen für Ihren Maschinenraum, bevor Sie den Kompressor und das Absaugsystem wieder einschalten.
- Überprüfen Sie die [A-dec Checkliste zur Gerätewartung in Verbindung mit nachfolgenden Abschnitten und Gerätehinweisen](#). *(Weitere Informationen finden Sie in den unten aufgeführten Ressourcenlinks.)*
- Testen Sie alle Funktionen und beweglichen Elemente Ihres Geräts, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
- Falls etwas nicht ordnungsgemäß funktionieren oder Probleme mit Ihrer Behandlungseinheit auftreten sollten, wenden Sie sich an Ihren autorisierten A-dec-Händler vor Ort oder rufen Sie den A-dec-Kundendienst unter +1 503 538 7478 an oder senden Sie eine E-Mail an A-dec.Global@a-dec.com.

Wichtige Hinweise und Empfehlungen von A-dec *(besuchen Sie unser Ressourcen Center unter a-dec.com):*

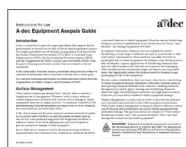


A-dec Handbuch zur Sterilhaltung der Behandlungseinheit

Bietet grundlegende Richtlinien für das Oberflächenmanagement von A-dec-Geräten.

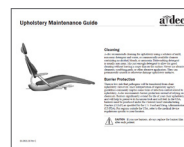

A-dec Handbuch zur Polsterwartung

Umfassende Anleitung zur Polsterpflege des A-dec Behandlungsstuhls.

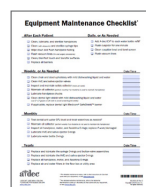

A-dec Checkliste zur Gerätewartung

Checkliste der wichtigsten täglichen, wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Wartungsarbeiten an der Behandlungseinheit.

Fortsetzung...



Behandlungsstuhl und OP-Lampe:

- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter des Stuhls (an oder in der Nähe der Stuhlbasisplatte) eingeschaltet ist.
- Schalten Sie das Licht ein und aus und testen Sie die verschiedenen Lichtmodi Ihrer OP-Lampe.

Wichtige Hinweise und Empfehlungen von A-dec (besuchen Sie unser Ressourcen Center unter a-dec.com):



Bedienungsanleitung für den A-dec Behandlungsstuhl

Wählen Sie ihr Modell aus der Liste der Suchergebnisse.



A-dec Handbuch zur Polsterwartung

Umfassende Anleitung zur Polsterpflege des A-dec Behandlungsstuhls.



Bedienungsanleitung für die A-dec OP-Lampe

Wählen Sie ihr Modell aus der Liste der Suchergebnisse.



Wartung des Arztelements und der Wasserleitungen:

A-dec empfiehlt die Durchführung einer Schockbehandlung aller Wasserleitungen des Arztelements und der Behandlungseinheit, bevor Sie Ihre Praxis wieder eröffnen.


- Reinigen Sie gründlich alle Wasserflasche.
- Wenden Sie eine Schockbehandlung mit einem von der EPA zugelassenen Produkt an. Wenn sich Ihre Praxis außerhalb der USA befindet, wenden Sie sich an Ihren autorisierten A-dec-Händler, um weitere Empfehlungen zu erhalten.
- Nehmen Sie den täglichen Gebrauch von A-dec ICX®-Tabletten und dem von A-dec empfohlenen Wartungsprotokoll für Wasserleitungen wieder auf. (Weitere Informationen finden Sie in den unten aufgeführten Ressourcenlinks.)
- Überwachen Sie regelmäßig das Wasser Ihrer Behandlungseinheit. (Empfehlungen zur Häufigkeit und zur Verfahrensweise finden Sie im [A-dec Handbuch zur Wartung der Wasserleitungen](#))
- Befolgen Sie alle täglichen, wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Anweisungen, die sich auf das Arztelement beziehen und in der [A-dec Checkliste zur Gerätewartung](#) aufgeführt sind. (Weitere Informationen finden Sie in den unten aufgeführten Ressourcenlinks.)

Wichtige Hinweise und Empfehlungen von A-dec (besuchen Sie unser Ressourcen Center unter a-dec.com):




Bedienungsanleitung des A-dec Arztelements

Wählen Sie ihr Modell aus der Liste der Suchergebnisse.

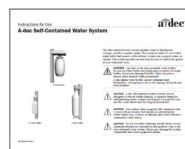


A-dec Gebrauchsanweisung für das in sich geschlossene Wassersystem

Umfassende Bedienungsanleitung für das in sich geschlossene A-dec-Wassersystem.

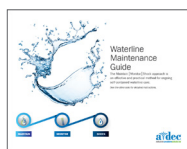

A-dec Wartungshandbuch für Wasserleitungen

Umfassende Anleitung zur Pflege der Wasserleitungen für A-dec Behandlungseinheiten.

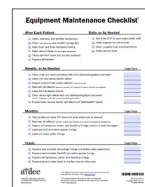

A-dec Checkliste zur Gerätewartung

Checkliste der wichtigsten täglichen, wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Wartungsarbeiten an der Behandlungseinheit.

Fortsetzung...



Assistenzinstrumente:

- Reinigen Sie alle Absaugleitungen gemäß Ihres normalen Reinigungsprotokolls.
- Führen Sie das von A-dec empfohlene Reinigungsprotokoll für alle Hochleistungsabsauger (HVE) und Speichelsauger, Luft-/ Wasserspritzen und Festteilesammler durch. *(Weitere Informationen finden Sie in den unten aufgeführten Ressourcen.)*
- Testen Sie die Funktion der Luft-/ Wasserspritze. Falls Sie ein Luft- / Wasserleck feststellen sollten oder falls der Luft-/ Wasserfluss beim Loslassen der Knöpfe nicht sofort stoppen sollte, ersetzen und schmieren Sie die O-Ringe der Spritze und die der Druckknopfventile.
- Befolgen Sie alle täglichen, wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Anweisungen, die sich auf die Helferinnen Instrumente und die dazugehörige Wassereinheit beziehen und in der *A-dec-Checkliste für die Gerätewartung aufgeführt sind*.

Wichtige Hinweise und Empfehlungen von A-dec *(besuchen Sie unser Ressourcen Center unter a-dec.com):*



A-dec Gebrauchsanweisung für Assistenzinstrumente

Wählen Sie ihr Modell aus der Liste der Suchergebnisse.



A-dec Gebrauchsanweisung für Spritzen

Wählen Sie ihr Modell aus der Liste der Suchergebnisse.



Handstücke und andere integrierten Instrumente:

Beachten und befolgen Sie immer die Gebrauchsanweisung des Herstellers, die mit Ihrem Gerät mitgeliefert wurde.

- Überprüfen Sie alle eingeschweißten Instrumente. Falls die Schweißnaht des Sterilisationsbeutels in irgendeiner Weise beeinträchtigt zu sein scheint, muss das Instrument neu aufbereitet und der Sterilisationsvorgang wiederholt werden.
- Überprüfen Sie, ob die Instrumente sauber und in einem guten Zustand sind.
- Testen Sie jedes Ihrer Handstücke auf die ordnungsgemäße Funktion, einschließlich der Luft- und Wasserkühlung.

Wichtige Hinweise und Empfehlungen von A-dec *(besuchen Sie unser Ressourcen Center unter a-dec.com):*



Gebrauchsanweisung für Handstücke und Motoren

Wählen Sie ihr Modell aus der Liste der Suchergebnisse.

Fortsetzung..



 **A-dec Hauptniederlassung**

2601 Crestview Drive
Vereinigte Staaten von Amerika
Tel: 1.800.547.1883 innerhalb der USA/Kanada
Tel: +1.503.538.7478 außerhalb der USA/Kanada
www.a-dec.com

A-dec Australia

Tel: 1.800.225.010 innerhalb von Australien
Tel: +61.(0)2.8332.4000 außerhalb von Australien
customer.service@a-dec.com.au

A-dec China

Tel: 400.600.5434 innerhalb von China
Tel: +86.571.89026088 außerhalb von China

A-dec United Kingdom

Tel: 0800.233285 innerhalb von GB
Tel: +44.(0).24.7635.0901 außerhalb von GB
info@a-dec.co.uk

86.0877.03 Rev A
Ausstellungsdatum: 2020-06-15
Copyright 2020 A-dec Inc.
Alle Rechte vorbehalten.