


## Konzoly monitorů A-dec



Konzoly monitorů A-dec používají některý z následujících mechanismů nastavení polohy:


### **Samoaretační**

Tyto konzoly zajišťují trvalé napětí, které udržuje monitor v nastavené poloze.

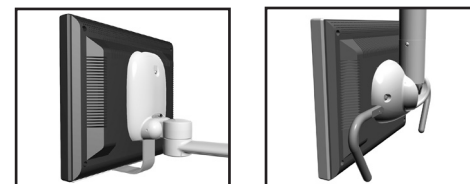

### **S ruční aretací**

Na těchto konzolách je páčka, která umožňuje nastavenou polohu sklonu monitoru ručně zaaretovat.

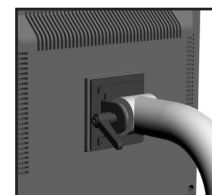

Konzoly monitorů A-dec jsou kompatibilní se standardem VESA (Video Electronics Standards Association), a proto podporují většinu značek a velikostí monitorů.




**POZNÁMKA:** Konzoly monitoru A-dec jsou určeny pro umístění a polohování plochého monitoru určeného pro zdravotnictví nebo ekvivalentního monitoru. Požadavky na monitory jsou uvedeny v tabulce na straně 3.


## Seřízení konzoly monitoru a její technické údaje

Informace o seřízení konzoly monitoru a její technické údaje jsou uvedeny ve formě následujících obrázků a tabulky na straně 3.


### Provedení 1, samoaretační

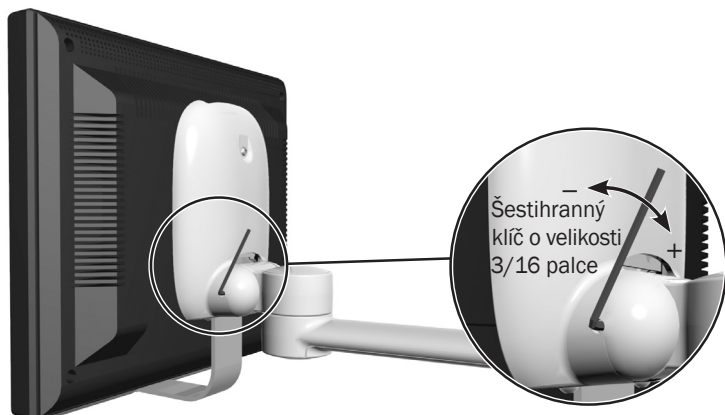


### Provedení 2, samoaretační

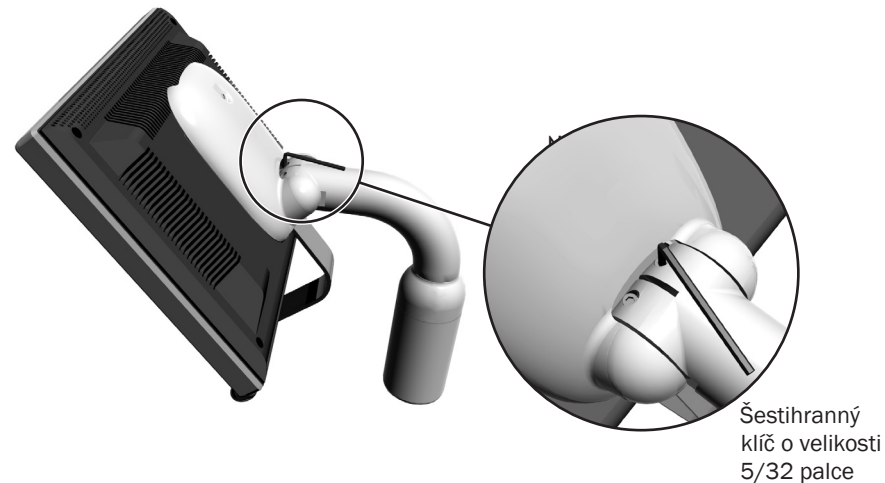

### Provedení 3, samoaretační

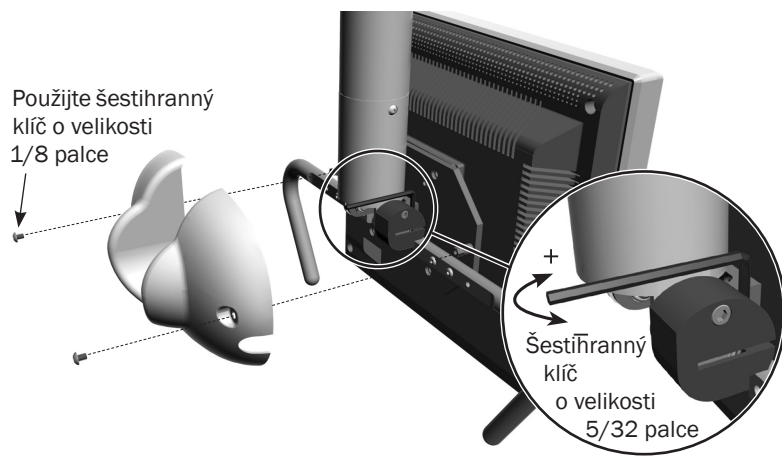

### Provedení 4, s ruční aretací

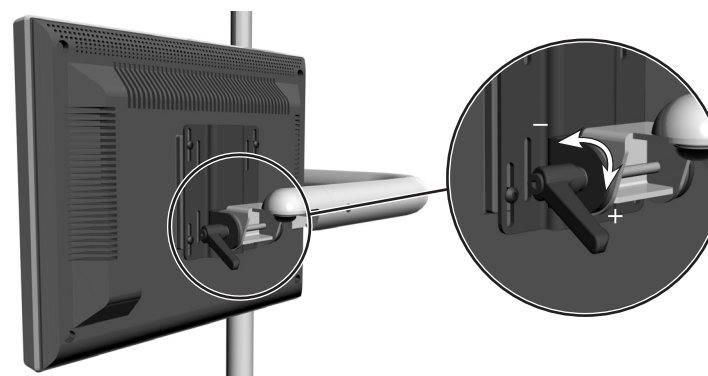

Seřízení napětí ve vswlém směru	Velikost šestihhranného klíče	Způsob seřízení	K dispozici pro	Maximální hmotnost monitoru	Maximální velikost monitoru
<p><b>Provedení 1, samoaretací</b>  Otočením šestihhranného klíče po směru hodinových ručiček napětí zvýšíte, otočením proti směru hodinových ručiček je snížíte.</p>	3/16 palce	Samoaretace, jedno napětí	křesla, bloky podpory	9 kg (20 liber)	Úhlopříčka 483 mm (19 palců)
<p><b>Provedení 2, samoaretací</b>  Otočením šestihhranného klíče po směru hodinových ručiček napětí zvýšíte, otočením proti směru hodinových ručiček je snížíte. Toto seřízení bude pravděpodobně třeba provést pro napětí směrem nahoru i pro napětí směrem dolů.</p>	5/32 palce	Samoaretace, dvě napětí	křesla, bloky podpory, připevnění ke kolejnici skřínky	14 kg (31 liber)	Úhlopříčka 483 mm (19 palců)
<p><b>Provedení 3, samoaretací</b>  Pomocí šestihhranného klíče o velikosti 1/8 palce odstraňte šrouby zadního krytu. Pomocí šestihhranného klíče o velikosti 5/32 palce zvýšte nebo snižte napětí konzoly ve vswlém směru.  <i>(Poznámka: Po sejmutí krytu může být poloha rukojetí změněna. Pomocí šestihhranného klíče o velikosti 1/8 palce odstraňte a vyměňte šrouby rukojetí.)</i></p>	1/8 palce 5/32 palce	Samoaretace, jedno napětí	stropy, skřínky, stěny	9 kg (20 liber)	Úhlopříčka 483 mm (19 palců)
<p><b>Provedení 4, s ruční aretací</b>  Otočením páčky po směru hodinových ručiček monitor v dané poloze zaaretujete.</p>	--	Ruční aretace, páčka	křesla, bloky podpory	9 kg (20 liber)	Úhlopříčka 483 mm (19 palců)

## Technické údaje a záruka



**DŮLEŽITÉ INFORMACE** Informace o záruce, technické údaje o parametrech zapojení do elektrické sítě, vysvětlení symbolů a údaje o dalších zákonných požadavcích jsou uvedeny v dokumentu *Povinné informace, technické údaje a záruka* (p/n 86.0221.11), který je k dispozici v Centru zdrojů na adrese [www.a-dec.com](http://www.a-dec.com).



**POZNÁMKA:** Technické údaje mohou být bez upozornění změněny. Požadavky se mohou v závislosti na místě vašeho působiště lišit. Další informace vám poskytne autorizovaný prodejce společnosti A-dec.

## Modely a verze produktů popsané v tomto dokumentu

Modely	Verze	Popis
200, 300, 381, 382, 482, 581, 584, 585, 586, 587, Performer 8000	A	Konzola monitoru



### Sídlo společnosti A-dec

2601 Crestview Drive  
Newberg, Oregon 97132  
Spojené státy americké  
Tel.: 1 800 547 1883 v USA a Kanadě  
Tel.: 1 503 538 7478 mimo USA a Kanadu  
[www.a-dec.com](http://www.a-dec.com)

### A-dec Austrálie

Unit 8  
5-9 Ricketty Street  
Mascot, NSW 2020  
Austrálie  
Tel.: 1 800 225 010 v Austrálii  
Tel.: +61 (0) 2 8332 4000 mimo Austrálii

### A-dec Čína

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.  
528 Shunfeng Road  
Qianjiang Economic Development Zone  
Hangzhou 311100, Zhejiang, Čína  
Tel.: 400 600 5434 v Číně  
Tel.: +86 571 89026088 mimo Čínu

### A-dec Velká Británie

Austin House, 11 Liberty Way  
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ  
Anglie  
Tel.: 0800 ADEC UK (2332 85) ve Velké Británii  
Tel.: +44 (0) 24 7635 0901 mimo Velkou Británii



86.0309.11 Rev G  
Datum vydání 2020-03-05  
Copyright 2020 A-dec Inc.  
Všechna práva vyhrazena.