

MODE D'EMPLOI

A-dec 461

CRACHOIR ET SUPPORT CENTRAL



The logo for A-dec, featuring a stylized caduceus symbol above the lowercase text "a dec".

Copyright

© 2020 A-dec Inc. Tous droits réservés.

A-dec Inc. ne donne aucune garantie quant à ce document, y compris, notamment, aucune garantie tacite de qualité commerciale et d'adaptation à un but particulier. A-dec Inc. ne peut être tenue pour responsable de toute erreur contenue dans ce document ou de tout autre dommage lié indirectement à la livraison, la performance ou l'utilisation de ce matériel. Les informations figurant dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. En cas de problèmes constatés dans la documentation, merci de nous les signaler par écrit. A-dec Inc. ne garantit pas que ce document est dépourvu d'erreurs.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite, modifiée ou transmise sous aucune forme ou par un moyen quelconque, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou tout système de stockage et de récupération d'informations, sans l'autorisation écrite préalable d'A-dec Inc.

Marques de fabrique et autres droits de propriété intellectuelle

A-dec, le logo A-dec, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC, Radius et reliablecreativesolutions sont des marques de fabrique d'A-dec Inc. et ont été déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200 et EasyFlex sont également des marques d'A-dec Inc. Aucune des marques de fabrique ou des appellations commerciales citées dans ce document ne peut être reproduite, copiée ni manipulée de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de son propriétaire.

Certains symboles et icônes du clavier sont la propriété d'A-dec Inc. L'utilisation de ces symboles ou icônes, en tout ou partie, sans le consentement écrit exprès d'A-dec Inc., est strictement interdite.

Informations réglementaires et garantie

Pour obtenir des informations relatives à la réglementation et à la garantie A-dec, consulter le document *Informations réglementaires, caractéristiques techniques et garantie* (réf. 86.0221.01) disponible dans le Centre de ressources du site www.a-dec.com.

Entretien

Pour toute information sur l'entretien des produits, contacter le distributeur A-dec agréé le plus proche. Pour trouver le revendeur agréé le plus proche ou obtenir plus d'informations sur l'entretien, consulter le site www.a-dec.com ou contacter A-dec au +1 800 547 1883 aux États-Unis et au Canada, ou au +1 503 538 7478 dans le reste du monde.

Modèles et versions des produits abordés dans ce document

Modèle	Version	Description
461	A	Support central

Schéma détaillé

Rinçage du bol2



Nettoyage du bol6



Bouteille d'eau5



Remplissage
du gobelet.....2



Commandes
du crachoir2




Réglage du débit.....4




Fonctionnement et réglage	2
Nettoyage et entretien.....	5
Caractéristiques techniques.....	8

Fonctionnement et réglage

Fonctionnement du crachoir

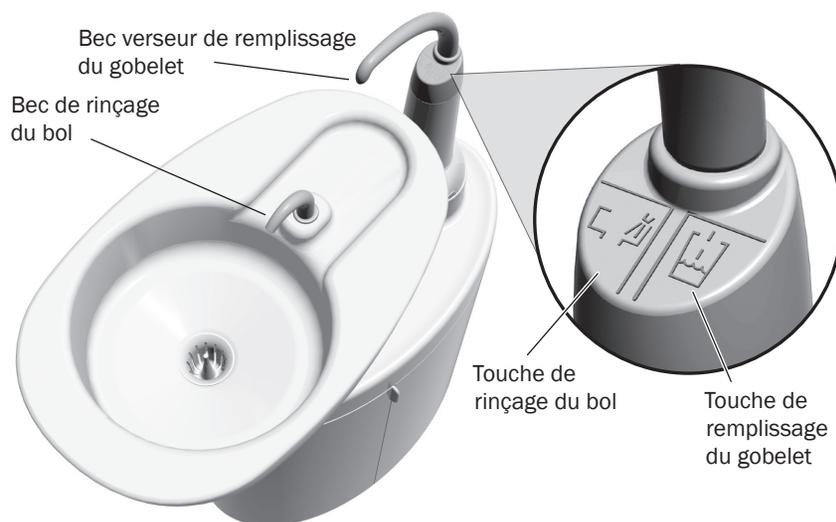

Clavier Standard illustré

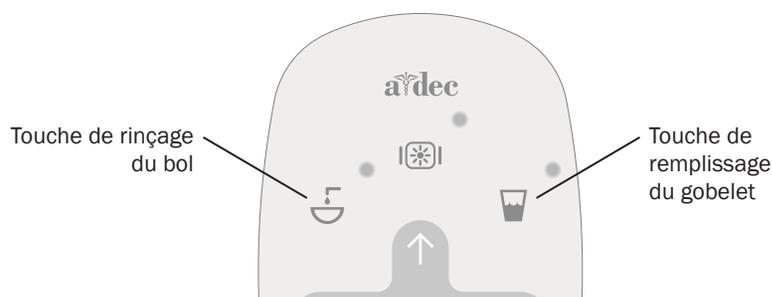

IMPORTANT Clavier Standard illustré. Pour les autres claviers, consulter le mode d'emploi de votre unité.

Activation/désactivation du remplissage du gobelet et du rinçage du bol

Utiliser les icônes sur le clavier (☑, ☒) ou les touches sur le crachoir (☑, ☒) pour contrôler les fonctions de remplissage du gobelet et de rinçage du bol.


Icône/fonction	Actions/options
 (ou  Remplissage du gobelet	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer une fois pour activer le fonctionnement minuté. Le réglage usine prévoit un remplissage de 2,5 secondes. Appuyer et maintenir enfoncé pour un fonctionnement manuel.
 (ou  Rinçage du bol	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer une fois pour activer le fonctionnement minuté. Le réglage d'usine par défaut est un rinçage de 30 secondes. Appuyer deux fois pour un écoulement continu. Appuyer ensuite une fois pour arrêter l'eau. Appuyer et maintenir enfoncé pour un fonctionnement manuel. Relâcher pour arrêter l'eau.

Remarque : Les symboles des claviers sont la propriété d'A-dec Inc.

Personnalisation de la durée de remplissage du gobelet et de rinçage du bol sur le crachoir

- Appuyer de manière prolongée sur  et sur  sous le bec verseur de remplissage du gobelet jusqu'à entendre un bip, qui indique que le mode de programmation est activé.
- Dans un délai de cinq secondes, maintenir enfoncé  ou  pendant la durée souhaitée.
- Trois bips confirment que les nouveaux réglages sont enregistrés.

Fonctionnement du crachoir (suite)

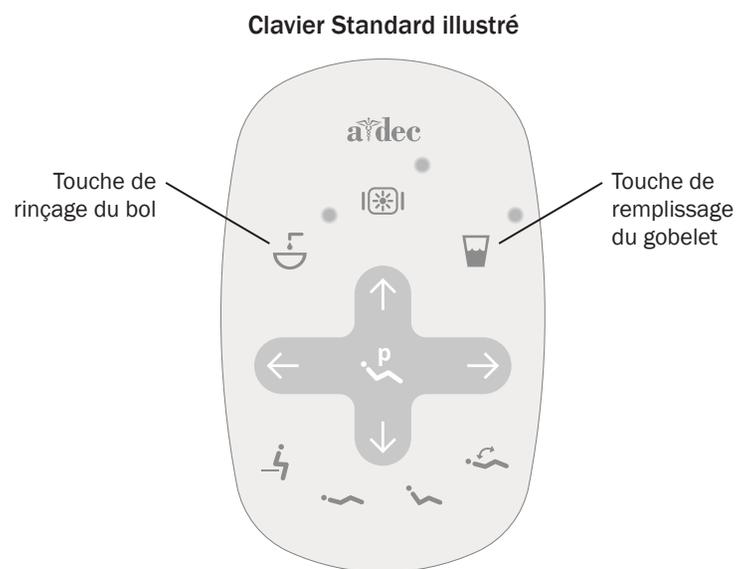

Personnalisation de la durée de remplissage du gobelet et de rinçage du bol sur le clavier

1. Appuyer de manière prolongée sur jusqu'à entendre un bip, qui indique que le mode de programmation est activé.
2. Dans un délai de cinq secondes, maintenir enfoncé ou pendant la durée souhaitée.
3. Trois bips confirment que les nouveaux réglages sont enregistrés.



IMPORTANT Clavier Standard illustré. Pour les autres claviers, consulter le mode d'emploi de votre unit.

Interrupteur d'arrêt du crachoir

Si un objet se loge sous le crachoir lors de l'abaissement du fauteuil, un interrupteur d'arrêt interrompt le déplacement du fauteuil afin d'éviter tout dommage. Si l'objet se coince sous le fauteuil, appuyer sur la touche sur la pédale ou le clavier pour retirer l'objet et reprendre le fonctionnement normal.



IMPORTANT Pour obtenir plus d'informations sur les fonctions de sécurité du fauteuil, se reporter au mode d'emploi de votre fauteuil.

Réglage du débit de rinçage du bol




La fonction de rinçage du bol doit fournir assez d'eau pour pouvoir rincer entièrement le bol du crachoir. Si le débit n'est pas suffisant, il est possible de le régler au niveau du support central :

1. Retirer le cache latéral du support central en tirant les bords inférieurs de celui-ci vers l'extérieur.
2. Lorsque la fonction de rinçage du bol est en marche, serrer le robinet-vanne à manchon déformable afin de réduire le débit. Desserrer le robinet pour augmenter le débit.
3. Pour un rinçage optimal, régler le débit en tournant le bec verseur de rinçage du bol.

Nettoyage et entretien

Utilisation de protections

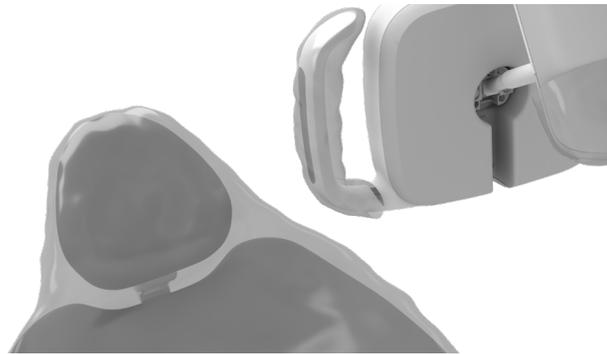

REMARQUE Pour une utilisation et une mise au rebut appropriées des protections, se reporter au Mode d'emploi du fabricant.

A-dec recommande l'utilisation de protections pour toutes les surfaces de contact et de transfert concernées. Les surfaces de contact sont les zones en contact avec les mains qui deviennent des points potentiels de contamination croisée durant les interventions dentaires. Les surfaces de transfert sont les surfaces qui sont contaminées au contact des instruments et autres objets inertes.

Aux États-Unis, ces protections doivent être fabriquées dans le respect des bonnes pratiques (CGMP) préconisées et certifiées par l'agence américaine de surveillance des aliments et des médicaments (FDA, Food and Drug Administration). En dehors des États-Unis, il convient de se référer aux réglementations applicables aux dispositifs médicaux dans chaque pays.



IMPORTANT Des recommandations relatives au nettoyage et à la désinfection chimique des surfaces de contact et de transfert (lorsque des protections ne peuvent être utilisées ou sont abîmées) sont fournies dans le *Guide de stérilité du matériel A-dec* (réf. 85.0696.01).

Entretien du circuit d'eau



A-dec recommande d'effectuer un traitement de choc sur le circuit d'eau de l'unité avant d'utiliser le système pour la première fois.


Pour l'entretien régulier du circuit d'eau, A-dec recommande un protocole en trois parties : utilisation continue de comprimés de traitement du circuit d'eau A-dec ICX®, surveillance régulière de l'eau de l'unité et traitement de choc.



IMPORTANT Pour obtenir des informations détaillées sur le maintien d'une qualité d'eau satisfaisante dans votre système, consulter les modes d'emploi des pastilles ICX et de la bouteille du système d'eau propre :

ICX A-dec réf. 86.0613.00
 Système d'eau propre A-dec - Mode d'emploi ... réf. 86.0609.01
 Guide d'entretien du circuit d'eau réf. 85.0983.01

Entretien du crachoir et de l'évacuation

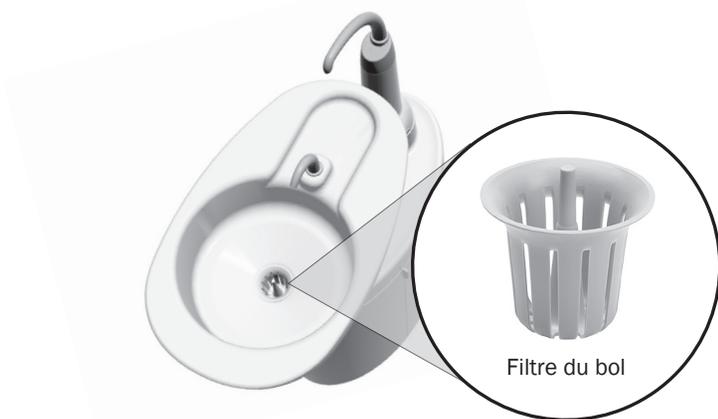

Becs verseurs et bol

Les becs verseurs arrondis et le bol lisse du crachoir sont faciles à nettoyer. Veiller à vider et à nettoyer le filtre du bol à chaque nettoyage du crachoir.



ATTENTION Ne jamais retirer les becs verseurs pour nettoyer le crachoir. Cela permet d'éviter que les solutions de nettoyage n'endommagent le matériel et ne contaminent l'eau de remplissage du gobelet.



CAUTION Ne pas vider pas le filtre du collecteur de solides ni le filtre du bol dans le crachoir, au risque d'en boucher l'évacuation. Jeter les résidus dans un conteneur pour déchets contaminés prévu à cet effet conformément aux réglementations en vigueur dans le pays. Après le nettoyage, toujours installer le filtre dans le bol du crachoir pour éviter que des débris bouchent l'évacuation.


Tuyau pour le drainage par gravité

À la fin de chaque journée, rincer le crachoir afin d'éliminer les débris des tuyaux d'évacuation flexibles. Si le crachoir n'est pas rincé régulièrement, des débris peuvent s'accumuler et entraver la bonne évacuation. Pour rincer le crachoir, mettre le rinçage du bol en marche pendant 60 secondes environ.

Pièces détachées

Pour procéder au remplacement du filtre du bol du crachoir, commander la pièce n° 75.0035.03.

Accès au réseau technique

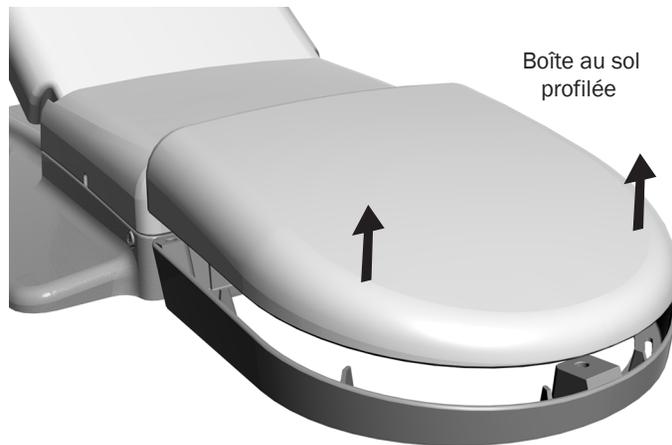

ATTENTION Lors du retrait ou du remplacement du cache, veiller à ne pas endommager les câbles ni les cordons. Vérifier que le cache est bien fixé après son remplacement.

Le réseau technique du système est situé dans la boîte au sol profilée sous le fauteuil. Il comprend généralement la prise électrique, ainsi que les raccordements pour l'air, l'eau et les drainages. Pour y accéder, soulever le cache et le retirer du boîtier de sol. Pour réaliser la maintenance, contacter le distributeur A-dec agréé le plus proche.

Caractéristiques techniques



IMPORTANT Pour connaître les caractéristiques électriques et énergétiques, la signification des symboles, et les autres exigences réglementaires, consulter le document *Informations réglementaires, caractéristiques techniques et garantie* (réf. 86.0221.01) disponible dans le Centre de ressources du site www.a-dec.com.



REMARQUE Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Les réglementations peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, contacter votre distributeur A-dec agréé.



 **Siège social d'A-dec**

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
États-Unis
Tél. : 1.800.547.1883 aux États-Unis/Canada
Tél. : 1.503.538.7478 hors États-Unis/Canada
www.a-dec.com

A-dec Australie

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australie
Tél. : 1 800 225 010 (en Australie)
Tél. : +61 (0) 2 8332 4000 (hors Australie)

A-dec Chine

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311100, Zhejiang, Chine
Tél. : 400 600 5434 (en Chine)
Tél. : +86 571 89026088 (hors Chine)

A-dec Royaume-Uni

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Angleterre
Tél. : 0800 ADEC UK (2332 85) (au Royaume-Uni)
Tél. : +44 (0) 24 7635 0901 (hors Royaume-Uni)



86.0374.01 Rev E
Date de publication 2020-03-10
Copyright 2020 A-dec Inc.
Tous droits réservés.