

Dane referencyjne punktu testowego płyty elektronicznej fotela



Lista punktów testowych i funkcji, patrz strona płyty elektronicznej danego produktu. Dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów, serwisu, identyfikacji części, konserwacji i innych, patrz odpowiedni przewodnik serwisowy lub referencyjny dokument serwisowy firmy A-dec. Obecne wersje dokumentów wsparcia firmy A-dec są dostępne w sekcji Baza dokumentów na stronie www.a-dec.com.




UWAGA Płyty elektroniczne są podatne na oddziaływanie elektryczności statycznej. Dotykając płyty elektronicznej lub tworząc połączenia do płyty elektronicznej albo z niej wychodzące, należy unikać wyładowań elektrostatycznych. Płyty elektroniczne powinien zainstalować wyłącznie elektryk lub wykwalifikowany personel serwisowy.

Płyta elektroniczna foteli A-dec 200, Performer, Decade i Cascade	2
Płyta elektroniczna fotela A-dec 311\411	3
Płyta elektroniczna fotela A-dec 511	4

Płyta elektroniczna foteli A-dec 200, Performer, Decade i Cascade


- **BKUP** – Podnosi oparcie fotela.
- **BSUP** – Podnosi podstawę fotela.
- **BSDN** – Obniża podstawę fotela.
- **BKDN** – Obniża oparcie fotela.
- **PRGM (przycisk)** – Do programowania pozycji fotela i ustawiania fotela. Po naciśnięciu tego przycisku rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy, a następnie w ciągu trzech sekund należy założyć zworkę na jedną z trzech pozycji PRGM i rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe potwierdzające ustawienie pozycji.
- **PRGM 0** – Zaprogramowana pozycja fotela 0, zazwyczaj używana jako pozycja wejścia/zejścia pacjenta.
- **PRGM 1** – Zaprogramowana pozycja fotela 1, zazwyczaj używana jako pozycja leżenia pacjenta na plecach.
- **PRGM 2** – Zaprogramowana pozycja fotela 2, zazwyczaj używana jako pozycja leżenia pacjenta na plecach.
- **PRGM 3** – Zaprogramowana pozycja fotela 3, zazwyczaj używana do przesuwania do tyłu do pozycji RTG/płukania. Zdjąć zworkę i założyć ją w celu przywrócenia fotela do jego pierwotnej pozycji.
- **EN/DIS TP/FS** – **Uwaga:** Ta pozycja nie działa na płytach wyprodukowanych przed czerwcem 2005 r. Aby włączyć/wyłączyć przyciski programowania i zaprogramowanej pozycji panelu sterowania/przełącznika nożnego, umieścić zworkę w tej pozycji, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk w celu włączenia/wyłączenia. Trzy sygnały dźwiękowe wskazują włączenie przycisku. Jeden sygnał dźwiękowy wskazuje wyłączenie przycisku.
- **FACT DEFAULT** – Resetuje zaprogramowane pozycje fotela do ustawień fabrycznych.
- **BK POT** – W celu zweryfikowania napięcia na potencjometrze pozycji oparcia umieścić odprowadzenie dodatnie woltomierza na lewym wtyku punktu testowego BK POT, a odprowadzenie ujemne – na lewym wtyku punktu testowego SPARE.
- **BS POT** – W celu zweryfikowania napięcia na potencjometrze pozycji oparcia umieścić odprowadzenie dodatnie woltomierza na lewym wtyku punktu testowego BS POT, a odprowadzenie ujemne – na lewym wtyku punktu testowego SPARE.
- **SPARE** – Pozycja nieaktywna do przechowywania zworki.
- **SPARE** – Pozycja nieaktywna do przechowywania zworki.

Przycisk PRGM

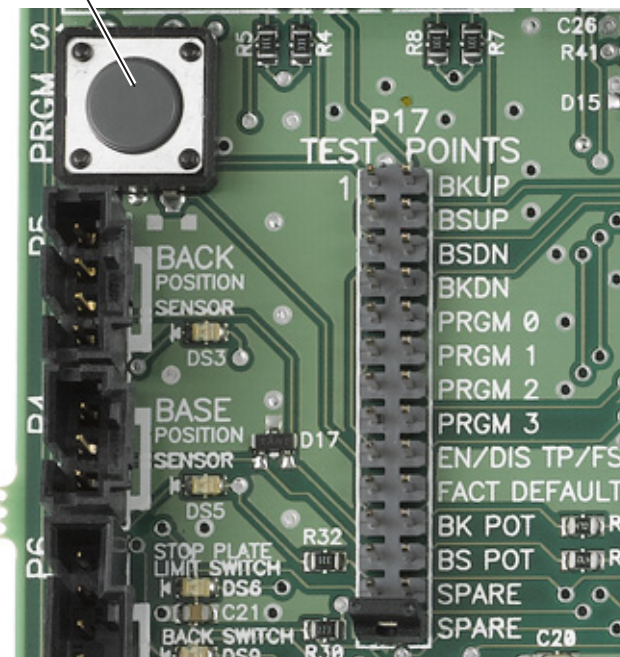

Płyta elektroniczna fotela A-dec 311\411

- **SPARE** – Pozycja nieaktywna do przechowywania zworki.
- **FACT DEFAULT** – Resetuje zaprogramowane pozycje fotela do ustawień fabrycznych.
- **BACK UP** – Podnosi oparcie fotela.
- **BACK DOWN** – Obniża oparcie fotela.
- **BASE UP** – Podnosi podstawę fotela.
- **BASE DOWN** – Obniża podstawę fotela.
- **PRGM MEMORY** – Do programowania pozycji fotela i ustawiania fotela. Po umieszczeniu zworki w tej pozycji rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy, następnie umieścić zworkę w jednej z pozycji PRGM i rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe potwierdzające ustawienie pozycji.
- **PRGM 0** – Zaprogramowana pozycja fotela 0, zazwyczaj używana jako pozycja wejścia/ zejścia pacjenta.
- **PRGM 1** – Zaprogramowana pozycja fotela 1, zazwyczaj używana jako pozycja leżenia pacjenta na plecach.
- **PRGM 2** – Zaprogramowana pozycja fotela 2, zazwyczaj używana jako pozycja leżenia pacjenta na plecach.
- **PRGM 3** – Zaprogramowana pozycja fotela 3, zazwyczaj używana do przesuwania do tyłu do pozycji RTG/ płukania. Zdjąć zworkę i założyć ją w celu przywrócenia fotela do jego pierwotnej pozycji.
- **EN/DIS TP/FS** – **Uwaga:** Ta pozycja nie działa na płytach wyprodukowanych przed czerwcem 2005 r. Służy do włączania/ wyłączenia przycisków programowania i zaprogramowanej pozycji panelu sterowania/ przełącznika nożnego lub zarządzania programowymi limitami podstawy.
 - **Wyłączenie/włączenie przycisków** – Umieścić zworkę w tej pozycji, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk pedału/ przełącznika nożnego w celu włączenia/ wyłączenia. Trzy sygnały dźwiękowe wskazują włączenie przycisku. Jeden sygnał dźwiękowy wskazuje wyłączenie przycisku.
 - **Ustawienie programowego limitu podstawy** – Ustawić fotel, umieścić zworkę w tej pozycji, nacisnąć i przytrzymać przycisk BASE UP lub BASE DOWN, aż rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe.
 - **Usunięcie programowego limitu podstawy** – Umieścić zworkę w tej pozycji, nacisnąć i przytrzymać przycisk BASE UP lub BASE DOWN, aż rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy potwierdzający wyłączenie ustawienia.
 - **Zmiana programowego limitu podstawy** – Usunięcie limitu, następnie resetowanie.

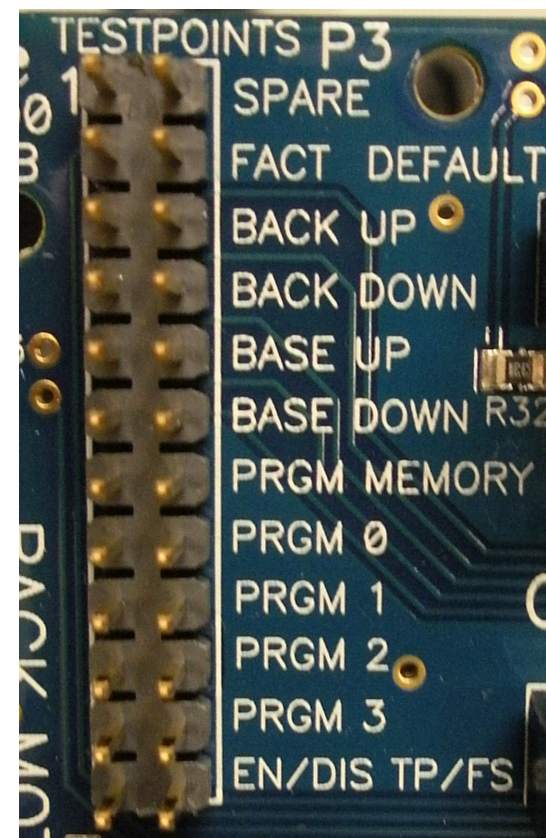

Płyta elektroniczna fotela A-dec 511

- **SPARE** – Pozycja nieaktywna do przechowywania zworki.
- **FACT DEFAULT** – Resetuje zaprogramowane pozycje fotela do ustawień fabrycznych.
- **BACK UP** – Podnosi oparcie fotela.
- **BACK DN** – Obniża podstawę fotela.
- **BASE UP** – Podnosi podstawę fotela.
- **BASE DN** – Obniża podstawę fotela.
- **PROGRAM** – Do programowania pozycji fotela i ustawiania fotela. Po umieszczeniu zworki w tej pozycji rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy, następnie umieścić zworkę w jednej z pozycji PRGM i rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe potwierdzające ustawienie pozycji.
- **PRGM 0** – Zaprogramowana pozycja fotela 0, zazwyczaj używana jako pozycja wejścia/zejścia pacjenta.
- **PRGM 1** – Zaprogramowana pozycja fotela 1, zazwyczaj używana jako pozycja leżenia pacjenta na plecach.
- **PRGM 2** – Zaprogramowana pozycja fotela 2, zazwyczaj używana jako pozycja leżenia pacjenta na plecach.
- **PRGM 3** – Zaprogramowana pozycja fotela 3, zazwyczaj używana do przesuwania do tyłu do pozycji RTG/płukania. Zdjąć zworkę i założyć ją w celu przywrócenia fotela do jego pierwotnej pozycji.
- **EN/DIS TP/FS** – **Uwaga:** Ta pozycja nie działa na płytach wyprodukowanych przed czerwcem 2005 r. Pozycja ta służy do włączania/wyłączania przycisków programowania lub zaprogramowanej pozycji panelu sterowania/przełącznika nożnego lub zarządzania programowymi limitami podstawy.
 - **Wyłączenie/włączenie przycisków** – Umieścić zworkę w tej pozycji, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk pedału/przełącznika nożnego w celu włączenia/wyłączenia. Trzy sygnały dźwiękowe wskazują włączenie przycisku. Jeden sygnał dźwiękowy wskazuje wyłączenie przycisku.
 - **Ustawienie programowego limitu podstawy** – Ustawić fotel, umieścić zworkę w tej pozycji, nacisnąć i przytrzymać przycisk BASE UP lub BASE DN, aż rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe.
 - **Usunięcie programowego limitu podstawy** – Umieścić zworkę w tej pozycji, nacisnąć i przytrzymać przycisk BASE UP lub BASE DN, aż rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy potwierdzający wyłączenie ustawienia.
 - **Zmiana programowego limitu podstawy** – Usunięcie limitu, następnie resetowanie.

