


A-dec® 300

a dec®

A-dec의 차별점

긴 수명을 고려한 설계

A-dec은 제품에 들어가는 작은 볼트로 시작해 그 어떤 세세한 부분도 가볍게 생각하지 않습니다. 당사는 대다수의 치과용 장비를 원료부터 완제품까지 직접 생산합니다. 뛰어난 품질이 가장 중요하기 때문입니다. 이런 작은 부품들은 눈에 보이지는 않지만 A-dec 브랜드로 선보이는 모든 제품들의 수명, 안락함, 기능 면에서 분명한 차별점을 만들어 냅니다. 여러분의 비즈니스에는 이 차별점이 가장 중요합니다.

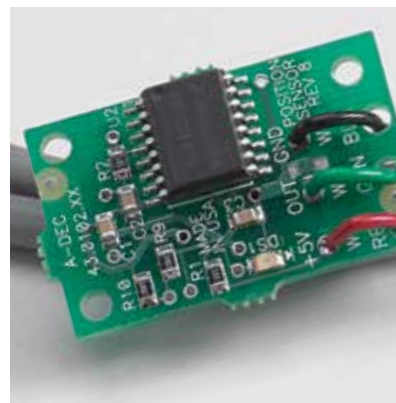

컨트롤 블록 - 특허받은 디자인으로 작동할 때마다 최대한 깨끗한 급수를 공급하도록 돕습니다.

리프트 실린더 - A-dec은 튼튼한 유압식 기계와 더 적은 수의 부품을 사용하여 제품을 만들고 설계합니다.

체어 위치 센서 - A-dec 기술은 정밀한 전자 센서와 디지털 신호를 사용합니다.







A-dec 300: 진화

디자인

튼튼한 베이스 플레이트는 견고한 체어의 기반이 됩니다. A-dec 300은 견고한 기반과 더불어 제품 수명이 20년인 유압 리프트 실린더를 사용하여 환자의 위치를 조용히 부드럽게 바꿔줍니다.

값

모듈식 제품으로 설계된 A-dec 300은 원하는 기능을 원하는 가격으로 선택할 수 있는 완전한 시스템입니다.

유연성

Traditional형이든 Continental형이든 선택은 여러분의 몫입니다. 왼편/오른편 전용 딜리버리든지 양방향 Radius®형 구성이든지 상관없이 핸드피스와 보조 장치에 언제든지 손쉽게 닿을 수 있습니다.

편안함

압력 매핑된 굴곡면과 가상 피벗 등반이로 환자가 긴장하지 않고 편안하게 느낄 수 있도록 돕습니다. 최대 181kg (400파운드)의 환자까지 편안하게 앉힐 수 있습니다.

접근성

환자가 이중 조절형 Headrest에서 편안히 쉬는 동안 슬림한 형태의 매우 얇은 등반이가 접근성을 최상으로 높여 줍니다. 수년간의 경험을 토대로 설계된 이러한 조합은 구강에 대한 접근성을 개선하면서 위치 조정을 더욱 용이하게 만듭니다.



인체 공학 및 경제성

진정한 편안함이란 불가능하다고 누가 주장합니까?
A-dec에서 생산하는 모든 환자용 체어와 치과의사 스톨
또는 보조사용 스톨은 수십 년의 연구, 대화, 테스트
그리고 기능 개선의 산물입니다. 단순한 곡선, 부드러운 선,
고유의 굴곡 하나도 그냥 지나치지 않고 진정한 효율성과
편안함을 제공할 수 있도록 확인했습니다. 다시 한 번
말씀드리지만 합리적인 가격의 A-dec 300도 예외가
아닙니다.

원하는 대로 작동

받침대형이든 Radius이든 원하는 대로 선택하십시오. 두 옵션 모두 손이 쉽게 닿는 곳에 기구가 있어 환자 치료에 전념할 수 있습니다.



A-dec 300 받침대 서포트 센터

Traditional 또는 Continental 딜리버리를 통해 수술 시 기술의 힘을 활용할 수 있습니다. 왼편 또는 오른편 전용 딜리버리는 아말감 분리기의 접근을 용이하게 하며 노출된 하드웨어를 제거하는 세련된 굴곡 플로어 박스를 제공합니다.



A-dec 300 Radius 시스템

오른손잡이 또는 왼손잡이 시술자용으로 쉽게 전환합니다. 단일 또는 이중 Radius 장치를 통해 체어의 전면을 중심으로 회전하여 진료 시 환자에 대한 접근성을 더 용이하게 만듭니다.




레버 풋 컨트롤

A-dec의 로운 레버 풋 컨트롤 옵션으로 제어하기가 더 쉬워졌습니다. 직관적인 건습식 좌우 작동 및 칩 블로어/액세서리 버튼으로 시선을 돌리지 않고 환자 치료에 집중할 수 있습니다. 최소한의 발 움직임으로 전기 및 공압 핸드피스 모듈을 정확히 조절할 수 있습니다.

다양한 선택



팔걸이가 포함된 이중 시트

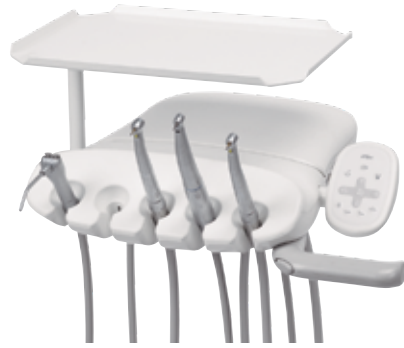

Traditional



표준형 터치패드



디스크 풋 컨트롤



팔걸이 없는 단일 시트



Continental



디렉스형 터치패드



레버 풋 컨트롤

시트 및 팔걸이

기본이 되는 것은 훌륭한 제어입니다. 안락한 이중 시트나 세척이 쉬운 단일 시트부터 팔걸이가 없거나 2단 팔걸이가 제공되는 옵션까지 다양한 옵션이 준비되어 있습니다.

딜리버리 시스템

직원들과 어떤 방식으로 일하고 계십니까? Traditional 및 Continental 딜리버리 시스템은 쿼드 전압 구강 내 라이트 광원과 2개의 보조 장비를 통합할 수 있습니다.

터치패드

손끝으로 액세스하여 제어 조절 과정을 간소화하고 치과용 라이트와 타구대 컨트롤에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 디렉스형 터치패드(옵션)에는 전기 모터, 카메라, scaler 같이 통합된 의료 기기에 필요한 컨트롤이 추가되어 있습니다.

풋 컨트롤

칩 블로워 옵션을 포함한 디스크형 또는 전기 및 공압 핸드피스들의 정확한 조절을 위한 A-dec 레버형이 마련되어 있습니다.



고정 유리 타구대



3단 홀더



4단 홀더



회전식 위생도기(용화소지) 타구대



이중 2단 홀더



A-dec 300 LED 라이트



A-dec 500 LED 라이트



Radius 모니터 장착



라이트 모니터 장착



링크 암을 통한 라이트 모니터 장착

타구대

유리를 선호하십니까, 위생도기(용화소지)를 선호하십니까? 아니면 고정형을 선호하십니까, 회전형을 선호하십니까? 두 가지 보울에는 시간이 설정된 컵필/보울 린스 기능이 포함되어 있습니다.

보조사용 홀더

보조사용 의료 장치를 가장 적합한 위치에 배치하십시오. 조정 가능한 3단 또는 4단 홀더를 체어 장착, 타구대 장착 또는 텔레스코핑 암 장착으로 사용할 수 있습니다.

치과용 라이트

정확한 조명은 필수적입니다. A-dec LED 조명은 균형 잡힌 밝기 및 그림자 없는 균일한 조명 패턴을 확보할 수 있습니다. 의자가 앉기/일어서기 위치로 이동하면 자동으로 조명이 켜지거나 꺼집니다.


모니터 장착

상담하고 교육하고 검토합니다. 모니터 장착은 앉아 있거나 누워 있는 자세에서 볼 수 있도록 회전합니다. 잠금형 또는 부동형 피벗, 위치 조정 핸들, 여러 장착 위치 등의 옵션을 원하는 대로 조정합니다.

단일 시트



여러분이 비치는 환경을 만드는 데 있어 가장 큰 영향을 끼치는 것은 바로 색상입니다. 그래서 A-dec에서는 다양한 범위의 색상과 선택 옵션을 제공하여 이중 또는 단일 시트를 조율할 수 있도록 합니다.

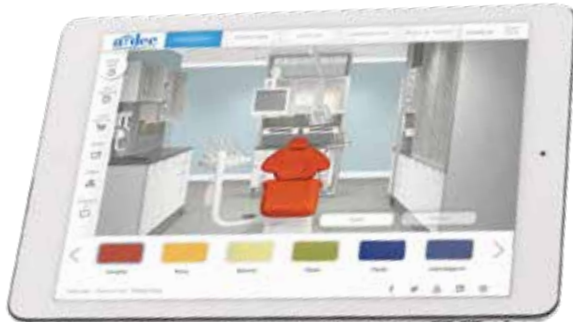

샘플 주문 웹 사이트:
a-dec.com/InspireMe

이중 시트



실제 색상은 다를 수 있습니다. 정확한 색상 샘플 및 최신 제품 정보를 얻으려면 해당 지역의 공식 A-dec 대리점에 문의하십시오.

사양

A-dec 300 치과용 체어

리프트 높이 범위	349mm~800mm(13.75인치~31.5인치), 이중 장착 시 로우 포인트 375mm(14.75인치)
얇고 구부러지는 등받이	32mm(1.25인치), 단일
드라이브 시스템	하이브리드 드라이브(전기 기계식 틸트, 유압 베이스)
체어 등받이 및 베이스 정지 스위치	예. 장애물이 탐지되면 하강 정지
헤드레스트	이중 조절형 및 글라이딩(손잡이형)
통합형 300와트 전원 공급장치	예
풋 스위치	옵션
장착 기능	부동형 - 2인치 포스트 장착, 받침대 또는 Radius(단일 또는 이중 장착)
시트 옵션	이중 또는 단일

딜리버리 시스템

	A-dec 300 Continental	A-dec 300 Traditional
컨트롤 블록	표준 3단, 4단(옵션)	표준 3단, 4단(옵션)
좌우 전환	예	예
튜브 옵션	비닐 또는 실리콘	비닐 또는 실리콘
핸드피스 홀더 위치	4단	4단
브레이크 핸들	표준 1개(두 번째는 옵션)	표준 1개(두 번째는 옵션)
터치패드 옵션	없음, 표준 또는 디럭스	없음, 표준 또는 디럭스
쿼드 전압 구강 내 라이트 광원	옵션	옵션
풋 컨트롤	표준, 칩 블로워 또는 레버	표준, 칩 블로워 또는 레버
암 시스템	에어 브레이크가 있는 균형 잡힌 플렉스암 A-dec 333 - Radius 장착 A-dec 335 - Radius 장착	에어 브레이크가 있는 균형 잡힌 플렉스암 A-dec 332 - Radius 장착 A-dec 334 - Radius 장착 수동 높이 조정 A-dec 336 - Radius 장착









A-dec 본사

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 미국
전화: 1.800.547.1883 (미국/캐나다)
전화: +1.503.538.7478 (미국/캐나다 외 지역)
팩스: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec 호주

전화: 1.800.225.010 호주 내 지역
전화: +61.(0)2.8332.4000 호주 외 지역

A-dec China

전화: 400.600.5434 중국 내 지역
전화: +86.571.89026088 중국 외 지역

A-dec 영국

전화: 0800.233285 영국 내 지역
전화: +44.(0).24.7635.0901 영국 외 지역

본 브로셔의 색상 및 제품은 실제 상품과 다를 수 있으며 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다. 정확한 색상 샘플 및 최신 제품 정보를 얻으려면 해당 지역 A-dec 대리점에 문의하십시오.

본 문서의 모든 상표에는 미국 및 해외에서 A-dec, 그 계열사 및 공동 공급업체의 상표권이 적용됩니다.