

A-dec® 300

a dec®

A-dec Farkı

Yaşam İçin Üretildi

A-dec'te, ürünlerimizde kullanılan cıvatalara varıncaya kadar, hiçbir ayrıntı çok küçük değildir. Bu nedenle, kalitemizi garantilemek için, tamamlanmış dental ürünlerimizin büyük bir kısmını ham maddelerden kendimiz üretiyoruz. Bu parçalar görünür olmamalarına rağmen, bizim adımızı taşıyan tüm ürünlerin ömürlerinde, konforlarında ve işlevlerinde fark yaratırlar. Ve sizin işinize gelince bu her şey demektir.



Kumanda bloğu – Patentli tasarım, her etkinleştirmede temiz bir tedavi suyu sağlar.

Kaldırma silindiri – A-dec tarafından tasarlanan ve üretilen, daha az parçaya sahip güçlü bir hidrolik sistemdir.

Koltuk konumu sensörü – A-dec teknolojisi hassas elektronik sensörler ve dijital sinyaller kullanır.





A-dec 300: Gelişim

Tasarım

Güçlü bir taban plakası, sağlam bir koltuğun temelini oluşturur. Fiziksel güvenliğin yanı sıra, A-dec 300'ün 20 yıllık bir kullanım ömrü için tasarlanan hidrolik kaldırma silindiri, hastaları sessiz ve rahat şekilde konumlandırır.

Değer

Modüler bir çözüm olarak tasarlanan A-dec 300, ihtiyacınız olan fiyat noktasıyla istediğiniz özellikleri seçmenizi ve uygulamanızı sağlayan tam bir sistemdir.

Esneklik

Traditional veya Continental, seçim sizindir. Seçiminiz yerleşik bir sol/sağ tablet veya iki elle de kullanılabilen Radius® yapılandırması olsa da, başlıklar ve yardımcı ekipmanlar rahatça ulaşabileceğiniz bir konumdadır.

Konfor

Basınç haritalamayla hazırlanan konturlu yüzeyler ve sanal pivot sırtlık, rahat ve desteklenen bir hasta deneyimi sunar. 181 kg'a (400 pound) kadar olan hastalarla rahatlıkla kullanılabilir.

Erişim

Çift eklemlili tetiyer hastanızın rahat şekilde dinlenmesini sağlar, dar profilli ve ultra ince sırtlık ise hastaya erişiminizi optimize eder. Uzun yıllara dayanan bir deneyimle tasarlanan bu kombinasyon, sizin daha iyi bir konumda durmanızı ve oral kaviteye erişiminizi destekler.



Ergonomik ve Ekonomik

Mükemmel konfora ulaşmak neden imkânsız olsun? Tasarladığımız her hasta koltuğunun veya diş hekimi ya da asistan taburesinin temelinde onlarca yıla dayanan araştırma, iletişim, testler ve geliştirmeler yatıyor. Mükemmel bir verimlilik ve konfor sunduğumuzdan emin olmak için tüm basit kıvrımları, düz hatları ve yerleşik konturları her zaman için kontrol ederiz. Emin olabilirsiniz: Bu kural ekonomik A-dec 300 için de geçerlidir.

Sizinle Aynı Şekilde Çalışır

Kaideli veya Radius tipi seçeneklerinden istediğinize sahip olabilirsiniz. Her iki seçenek de aletlerinizin ulaşabileceğiniz bir konumda olmasını sağlar, böylelikle kesintisiz bir tedavi sunarsınız.



A-dec 300 Kaideli Destek Merkezi

Traditional veya Continental tablet sistemi teknoloji ile cerrahi çalışmalarınızı birleştirir. Yerleşik sol veya sağ tablet amalgam ayırıcıya kolayca erişmenizi sağlar, şık ve konturlu zemin kutusu ise donanım bileşenlerinin açıkta kalmasını önler.



A-dec 300 Radius Sistemi

Sol veya sađ elini kullanan operatörler rahatlıkla geçiř yapilabilir. Tekli veya ikili Radius kolu, prosedürler sırasında daha iyi bir hasta eriřimi için koltuđun ön kısmı çevresinde döner.


Pedallı Ayak Kumandası

A-dec'in yeni pedallı ayak kumandası seçeneđi, gelişmiş bir kontrol sunar. Sezgisel kullanılan ve yan yana çalışan ıslak/kuru geçiři ve chip blower/aksesuar düđmesi, başka bir yere bakmanıza gerek kalmadan hastaya odaklanmanızı sađlar. Minimal düzeyde ayak hareketi ile, hem elektrikli hem de pnömatrik başlıklar hassas şekilde ayarlarsınız.

Zengin Seçenek İmkânı



Kolçaklı ve dikişli döşeme

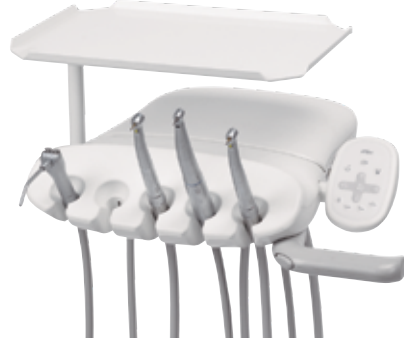

Traditional



Standart dokunmatik panel



Diskli ayak kumandası



Kolçaksız ve dikişsiz döşeme



Continental



Deluxe dokunmatik panel



Pedalli ayak kumandası

Döşeme ve Kolçaklar

Her şey harika bir koltukla başlar. Zengin dikişli veya kolay temizlenebilen dikişsiz döşemeden isteğe bağlı iki konumlu kolçakları olan veya kolçak içermeyen yapılandırmalara kadar çok sayıda seçeneğe sahipsiniz.

Tablet Sistemleri

Sizin ve ekibinizin çalışma stili nedir? Traditional ve Continental tablet sistemlerine bir quad-voltaj ağız içi ışık kaynağı ve iki yardımcı ekipman entegre edilebilir.

Dokunmatik Panel

Parmak ucu erişimi koltuk ayarlamalarını basitleştirir ve dental ışık ile kreşuar kontrolüne hızlı erişim sağlar. İsteğe bağlı deluxe dokunmatik panel elektrikli mikromotorlar, kameralar ve skalerler gibi entegre klinik cihazlar için kontrol ekler.

Ayak Kumandaları

Chip blower seçeneekli disk tipi — veya A-dec pedal tarzındaki kumanda ile elektrikli ve pnömatik başlıkları hassas şekilde ayarlayın.



Sabit cam kreşuar



Döner vitrifiye seramik kreşuar



3 konumlu tutucu



4 konumlu tutucu



Çift 2 konumlu tutucu



A-dec 300 LED



A-dec 500 LED



Radius monitör kolu



Işık ve monitör kolu



Işık monitörü kolu ve bağlantı kolu

Kreşuarlar

Sizin tercihiniz nedir, cam mı yoksa vitroz seramik mi? Sabit mi yoksa dönme işlevli mi? Her iki kreşuar da süre ayarlı bardak doldurma ve kreşuar yıkama işlevlerine sahiptir.

Asistan Tutucuları

Asistan klinik cihazlarının en fazla ihtiyaç duydukları yerde bulunmasını sağlayın. Ayarlanabilir 3 veya 4 konumlu tutucular koltuk montajı, kreşuar kolu veya teleskopik kol seçenekleriyle sunulmaktadır.

Dental Işıklar

Doğru aydınlatma temel bir ihtiyaçtır. A-dec LED ışıklar dengeli bir ışık yoğunluğu ile gölgeden arındırılmış muntazam bir ışık düzeni sağlar. Koltuk oturma veya kalkma konumuna hareket ettiği zaman otomatik olarak açılır/kapanır.


Monitör Kolları

Danışma. Eğitim. İnceleme. Monitör kolları pivot hareketle dönerek oturma ve sırtüstü konumlarından görüntülemeye olanak tanır. İhtiyacınıza göre kilitleme stili, hareketli pivot, konumlandırma kolu ve birden fazla montaj konumu özelliklerini seçin.

Dikişsiz Döşeme



Sizi yansıtan bir ortamı oluştururken renkler gerçek bir fark yaratır. Bu nedenle A-dec, dikişsiz ve dikişli döşemelerin uyumlu olmasını sağlamak için çok sayıda renk ve belirli seçenekler sunmaktadır.

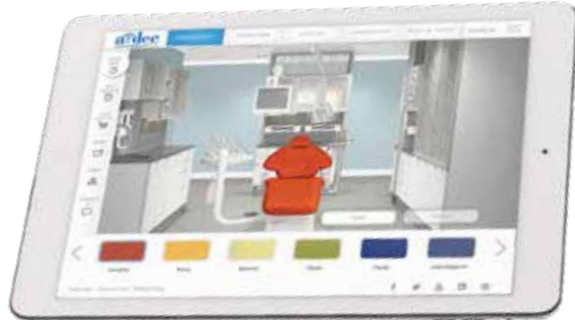

Renk örneklerini sipariş etmek için:
a-dec.com/InspireMe

Dikişli Döşeme



Gerçek renkler değişiklik gösterebilir. Renk örnekleri ve en güncel ürün bilgileri için yetkili A-dec satıcınıza başvurun.

Teknik Özellikler

A-dec 300 Dental Koltuk

Kaldırma yüksekliği aralığı	349 mm ila 800 mm (13,75 inç ila 31,5 inç); İkili montaj ile alçak nokta 375 mm (14,75 inç)
İnce, esnek sırtlık	32 mm (1,25 inç), dikişsiz
Tahrik sistemi	Hibrit tahrik (elektromanyetik eğim, hidrolik taban)
Koltuk sırtlığı ve taban durdurma anahtarı	Evet, bir engel algılandığı zaman aşağı hareketi durdurur
Tetiye	Çift eklemli ve kayan (kulp stili)
Entegre 300 watt güç kaynağı	Evet
Ayak pedalı	İsteğe bağlı
Montaj özelliği	Hareketli 2 inç bağlantı koluna monte, kaideli veya Radius (tekli veya ikili montaj)
Döşeme seçenekleri	Dikişli veya dikişsiz

Tablet Sistemleri

	A-dec 300 Continental	A-dec 300 Traditional
Kumanda bloğu	Standart 3 konumlu, isteğe bağlı 4 konumlu	Standart 3 konumlu, isteğe bağlı 4 konumlu
Sol/sağ değişimi	Evet	Evet
Hortum seçenekleri	Vinil veya silikon	Vinil veya silikon
Başlık tutucu konumları	4	4
Fren kolu/kolları	standart 1 kol, isteğe bağlı 2. kol	standart 1 kol, isteğe bağlı 2. kol
Dokunmatik panel seçenekleri	Yok, standart veya deluxe	Yok, standart veya deluxe
Quad-voltaj ağız içi ışık kaynağı	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı
Ayak kumandası	Standart, chip blower veya pedallı	Standart, chip blower veya pedallı
Kol sistemi	Havalı frene sahip, dengeli esnek kol A-dec 333 - Radius montajı A-dec 335 - Destek montajı	Havalı frene sahip, dengeli esnek kol A-dec 332 - Radius montajı A-dec 334 - Destek montajı Manuel yükseklik ayarı A-dec 336 - Radius montajı









A-dec Merkez Ofisi

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 ABD
Tel: 1.800.547.1883 ABD/Kanada içinden
Tel: +1.503.538.7478 ABD/Kanada dışından
Faks: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Avustralya

Tel: 1.800.225.010 Avustralya içinden
Tel: +61.(0)2.8332.4000 Avustralya dışından

A-dec Çin

Tel: 400.600.5434 Çin içinden
Tel: +86.571.89026088 Çin dışından

A-dec United Kingdom

Tel: 0800.233285 İngiltere içinden
Tel: +44.(0).24.7635.0901 İngiltere dışından

Gösterilen renkler ve ürünler gerçek malzemelerden farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Doğru renk örnekleri ve en güncel ürün bilgileri için lütfen yetkili A-dec satıcınıza başvurun.

Bu belgede yer alan tüm ticari markalar Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde A-dec'in, ortak şirketlerinin ve bunların kolektif tedarikçilerinin ticari marka haklarına tabidir.

©2022 A-dec Inc. Tüm hakları saklıdır.
85.6152.15/PP/500/6-22/Rev H