


Temassız
A-dec® LED



 a dec®

Salt parlaklık.

A-dec LED dental ışıklara baktığınızda fark edeceğiniz ilk şey ışığın saf, nötr ve beyaz oluşu olacaktır. Buna dokunmatik panelimizi ve tek bir yerden kumanda edilen tüm ışık modlarını ve işlevlerini de ekleyin. Muayenehanenizde parlak, düzenli ve birbirine bağlı bir deneyimi hem kendinize hem de hastalarınıza yaşatın.

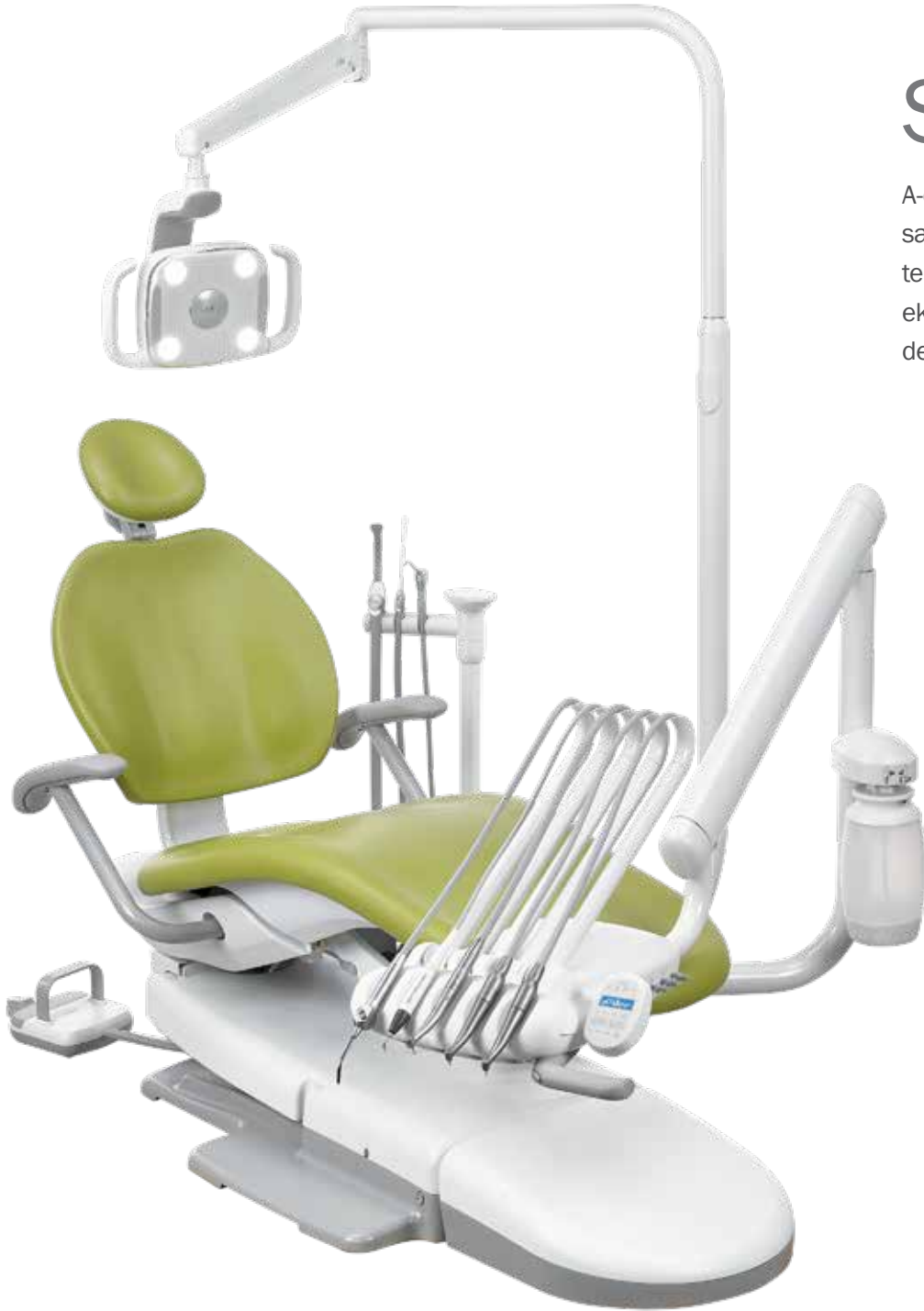

5 yıllık garanti koruması altında.

Farklılık ayrıntılarda gizlidir.



SALT YENİLİK

Sessiz pasif soğutma ile tasarlanan ışıklar sayesinde sizin de serinliğiniz sağlanır. Büyük ve ergonomik tutacaklarımız hem kullanım kolaylığı sunar hem de kullanılan endüstriyel dereceli rezin sayesinde darbe hasarlarına karşı direnç gösterir.



TEMİZ VE BASİT

Temassız açma/kapama aktivasyonu sensörü, asepsi protokollerini kolaylaştırıp temas noktalarını en aza indirirken ışık aktivasyonu seçeneklerini en üst düzeye çıkarmak için koltuk ön ayarlı otomatik açma/kapama ve dokunmatik panel kumandası ile buluşuyor. Temizlemesi kolaydır ve daha az bariyer gerekir.



BENZERSİZ TESTLER

"Yeterli" tanımı bizim için yeterli değildir. A-dec olarak ışıklarımızı minimum 20 yıllık kullanım ömrü için tasarlar ve test ederiz. Işığınızın ihtiyacınız olduğunda yanınızdadır.

A-dec LED


Hangi renk doğal?

Renkleri doğadaki gibi görmek doğru renkleri ve tüm renk spektrumunu görebilmeniz anlamına gelir. Gerçek yaşamdaki tonlar sayesinde teşhisleriniz çok daha kolay olacaktır.

Sağlam performans. A-dec ışıklarda, dişçilik profesyonellerinin çalıştığı ortamlar için özel olarak optik şekilde tasarlanmış kaliteli parçalar kullanılır. A-dec LED ışıkların beş yıllık garanti süresi vardır, bunun yanında 20 yıllık bir kullanım ömrü için tasarlanmışlardır.

Göz dostu. Yenilikçi ışık dağılımı gölgelenmeyi en aza indirmek için "stadyum" efektine sahip eş oranlı bir patern oluşturur ve göz yorgunluğunu azaltmak için yumuşatılmış kenarlı ışık paterni sağlar.

Olağanüstü aydınlatma. 94'lük yüksek renk geriverim endeksi (CRI) gün ışığının berraklığını sağlar ve yumuşak ve sert doku teşhisleri için oral kaviteyi renkleri doğru şekilde yansıtan bir ışıkla doldurur. Bu yüksek kaliteli ışık paterni parlaklık, geriverim ve eş oranlılık konusunda en yeni ISO9680 standartlarına uygundur.

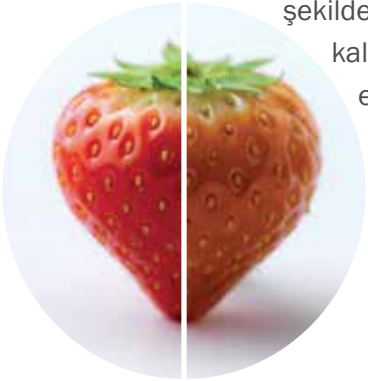

Yüksek CRI

Düşük CRI

Daha düşük renk geriverim endeksine (CRI) sahip daha az rafine LED muayene ışıkları ile kıyasladığınızda farkı görebilirsiniz.



Düşük enerji tüketimi. Sessiz. Sessizlik iyidir.

A-dec 300 pasif bir soğutma yöntemi kullandığı için fan ve radyant ısı söz konusu değildir.

Ekolojik ve ekonomik olarak akıllı. A-dec LED ışıklar,

parlaklıktan ödün vermeden halojen ışıklara göre %85 daha az enerji tüketir. Düşük ısıli olup toksik kimyasallar içermez ve çok az kızıl ötesi ışık üretir, bu bakımdan neredeyse hiç UV emisyonu yoktur. Bunların üzerine, 40.000 saatlik beklenen kullanım ömrü ile ampul değiştirmenize gerek bile kalmaz.

Mükemmel beyaz ışık. Tam anlamıyla nötr. Kelvin

birimiyle ölçülen ışık rengi, bir doktor olarak tüm işlerinizi etkiler. Tutarlı 5000K ışıklandırma doğal güneş ışığının kopyası olan dengeli, temiz beyaz ışık üretir.



A-dec 300 LED

İşte size herkese uygun bir ışık. A-dec 300, A-dec 500 LED'in berraklığını ve doğruluğunu isteyen ancak kaliteden ödün vermeden daha basit ve ekonomik bir çözüm arayanlar için özel olarak tasarlandı.

A-dec 300 LED Işık

A-dec 300 LED ışık seçenekleri

– A-dec dokunmatik panel ile entegre (veri iletişim sistemi "DCS"). Işık başlığındaki dokunmatik düğme veya A-dec dokunmatik paneli ile kumanda edilir.

– Manuel düğmeli, entegre olmayan model. Işık başlığının üzerindeki dokunmatik düğme ile kontrol edilir. Yalnızca Performer veya A-dec 200'de mevcuttur.

Özellik	Açıklama	Neden önemli?
Stadyum ışıklandırması	4 parlak beyaz LED	Gölgelenmeyi azaltır
Işık şiddeti (iki mod)	Yüksek: 25.000 lux (2323 fc) Düşük: 8.000 lux (743 fc)	İşiniz için gerekli ışıklandırmayı sağlar
Termal çıkış	51 BTU (ortalama halojen: 325 BTU)	Radyant ısı üretmez
Kompozit mod	Evet - 8000 lux (yavaş polimerizasyon)	Daha uzun çalışma süresine olanak tanır
Renk sıcaklığı	5000K	Doğru renk eşleştirmesi
Işık paterni	700 mm odak uzaklığında 95 mm x 145 mm (27,6 inçte 3,8 inç x 5,7 inç)	Hastanın gözlerine rahatsızlık vermeden oral kaviteyi aydınlatır
Yumuşatılmış kenar	Evet	Göz yorgunluğunu azaltır
Kullanım ömrü	40.000 saat (~20 yıl)	Ampul değişimine gerek kalmaz
Dönüş eksenleri	3 eksen: yatay, dikey, diagonal	Optimal ergonomik pozisyonu seçmenizi sağlar
Kontrol girişleri	Temassız açma/kapama sensörü, dokunmatik panel ve koltuk ön ayarlı otomatik açma/kapama	Esnek kontrol ve basitleştirilmiş asepsi
Uygunluk	A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200, Performer, Decade*, Cascade*	Ekipmanınıza uygun seçeneği tercih edin

Not: Kompozit modu sektör tarafından kabul edilmiş bir terimdir, 2014 ISO 9680 5.2.10 standardını karşılaması amaçlanmamıştır.

*A-dec 300 Radius Tablet Sistemi ile kombinasyon için uyumludur



A-dec LED'ler 20 yıldan beri kesintisiz performans sunarken halojen teknolojisine göre %75-85 daha az enerji tüketimine olanak sağlıyor.

Avantajları keşfedin.



SINIRSIZ POZİSYONLAMA

540° derecelik yatay rotasyon ile istediğiniz yönde 1½ tur döndürebilirsiniz. 120° derece eğilebilir gövde ve 80° derece diagonal ayarlama ile birleştiğinde, mükemmel bir pozisyonlama sağlar.



DOKUNMATİK PANEL KONTROLÜ

Koltuk sırtlığı arkaya yaslandığında programlanabilir düğmeler otomatik olarak ışığı açar ve koltuk giriş/çıkış pozisyonuna girince ışık otomatik olarak kapatılır (A-dec dokunmatik panel gereklidir).



TEMASSIZ KOLAY AÇMA/KAPAMA

Temassız tasarım 76 mm (3") mesafede kolay açma/kapamayı destekler.



KOLAY TEMİZLENİR

Asepsi düşünülerek tasarlanan ışık kalkanı, iç kısımda toz birikimini engellemek üzere düz ve sıkı bir şekilde üretilmiştir. Bariyer ile kullanıma hazır dokunma yüzeyleri, dış bölümün de kolayca temizlenmesini sağlar.



Işık Seçenekleri

Sizin için en uygun olanı hangisi? Çalışma stiliniz için en verimli olan montaj seçeneğini bulun.

Görünen tüm opsiyonlar müsait olmayabilir.
Yerel bayinize danışın.



Kızağa monte



Tavana monte



Radius® monte



Koltuğa monte



Duvara/dolaba monte



A-dec Genel Merkezi

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 ABD
Tel: 1.800.547.1883 ABD/Kanada içinden
Tel: +1.503.538.7478 ABD/Kanada dışından
Faks: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Avustralya

Tel: 1.800.225.010 Avustralya içinden
Tel: +61 (0)2 8332 4000 Avustralya dışından

A-dec Çin

Tel: 400.600.5434 Çin içinden
Tel: +86.571.89026088 Çin dışından

A-dec Birleşik Krallık

Tel: 0800 233285 Birleşik Krallık içinden
Tel: +44 (0) 24 7635 0901 Birleşik Krallık dışından

Belirli dokunmatik panel sembolleri A-dec Inc. şirketinin mülkiyetindedir. Bu sembollerin tümünün veya bir parçasının, A-dec Inc.'nin açık ve yazılı izni olmadan kullanılması kesinlikle yasaktır.

Gösterilen renkler ve ürünler asıl malzemelerden farklılık gösterebilir ve önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Doğru renk örnekleri ve en güncel ürün bilgileri için lütfen yetkili A-dec satıcınıza başvurun.

© 2023 A-dec Inc. Tüm hakları saklıdır.
85.0833.15/PP/250/7-18(2-23)/Rev A4