


# Funkční zóny

## Židličky A-dec 500

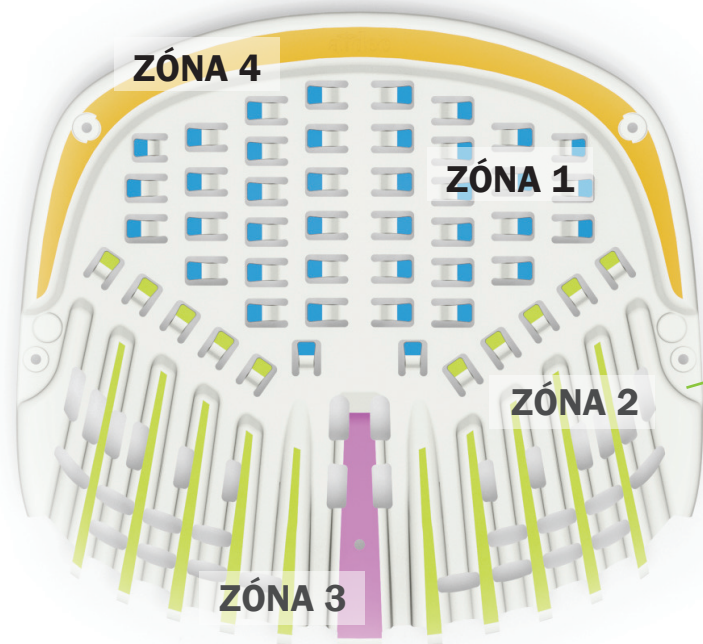

## Výjimečné funkční zóny

Systém dynamického sezení židliček A-dec 500 má pružnou konstrukci přizpůsobenou lidskému tělu. Design, který zahrnuje rozdělení na čtyři samostatné funkční zóny, umožňuje dobrý průtok krve do nohou a současně umísťuje dolní bederní část zad do správné, zdravé polohy v průběhu celého dne.

### Zóna 1 | Ohebné sedadlové pružiny

Ohebné pružiny poskytují vertikální podporu pro sedací kosti, současně se však pohybují a ohýbají s tělem během změn polohy těla v průběhu dne. Plyšová pěna a pružné čalounění tvoří další vrstvu přispívající ke komfortu a luxusu.

### Zóna 2 | Podpora stehien

Většina křesel má tuhou strukturu, která zamezuje průtoku krve do nohou a chodidel. Zóna 2 je navržena tak, aby poskytovala další měkkou podporu, která minimalizuje omezení průtoku krve a maximalizuje pohodlí.

### Zóna 3 | Protiskluzový výstupek

Umístění kyčlí nad kolena a pohodlné naklonění pánve dopředu (atletická pozice) zajišťují, že bederní část zad bude ve zdravé, vyrovnané poloze. Tento prvek na předním okraji židličky zajišťuje, že během celého pracovního dne nemůže dojít ke sklouznutí.

### Zóna 4 | Strukturální vnější okraj

Tři izolátory a dva kluzné povrchy připevňují střední vrstvu ke spodní vrstvě v systému dynamického sezení. To zajišťuje správnou oporu pro měkké tkáně, výsledkem je celodenní pohodlí a snížení výskytu „citlivých míst“.

**a dec**  
reliablecreativesolutions™

© 2015 A-dec Inc. Všechna práva vyhrazena.  
85.0780.10 Rev A