


功能区

A-dec 500座椅

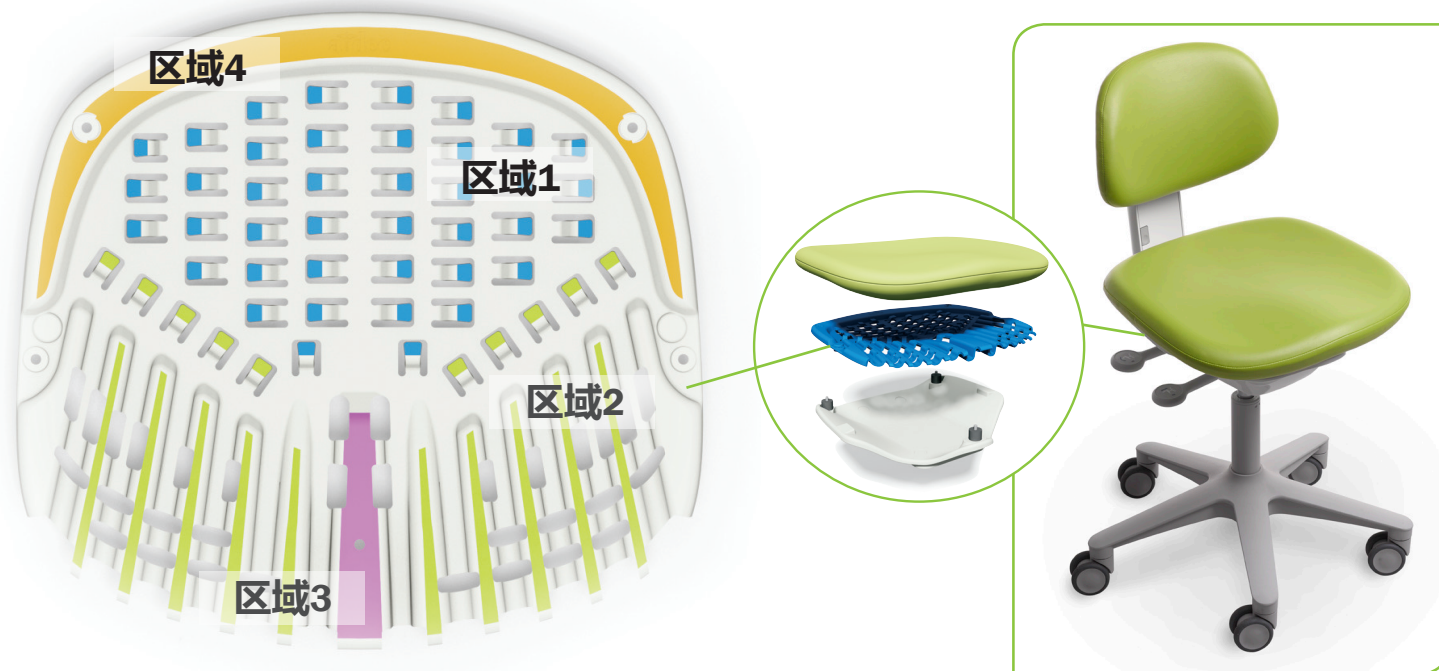

独特的功能区

A-dec 500座椅的动态座椅系统可提供灵活且贴合身体曲线的支撑。它分为四个单独的功能区，其设计不仅能确保身体至腿部的良好血液循环，还能为下腰椎提供支撑，从而使您实现全天的舒适和健康的身体姿势。

区域1|富有弹性的座椅弹簧

富有弹性的座椅不仅能够为您的背部提供垂直支撑，还可在您不断变换坐姿时始终跟随您的身体灵活地转动。充足的泡沫和柔软的皮垫还可为您提供额外一层的舒适享受。

区域2|腿部支撑

大多数治疗椅采用刚性结构，但这会严重阻碍身体至腿部与脚部之间的血液循环。区域2旨在提供额外的柔软性支撑，从而最大程度地促进血液循环并提高舒适感。

区域3|防滑圆头

通过以臀部高于膝盖的姿势坐下，并且骨盆略微向前倾（运动姿态），可以使背部的腰椎区域保持健康平衡的姿势。该前侧边缘新增了防滑功能，可让您一整天都可以安全无忧地开展工作的。

区域4|结构式外边缘

在动态座椅系统内，中间层通过三个隔离层和两个滑移面安装在底部层之上。这可确保为软组织提供恰当的支撑，从而帮助您实现一整天的舒适并减少“潜在危险点”。

a dec
reliablecreativesolutions™

© 2015 A-dec Inc.保留所有权利。
85.0780.06 Rev A